

{SIX PACK} KIT

1. Come funziona il dispositivo?

Il {Six Pack} set utilizza una corrente elettrica di bassa intensità per contrarre i muscoli e fornire un delicato massaggio o un potenziamento muscolare:

- Rilassa i muscoli contratti della spalla, della schiena e della zona lombare
- Migliora il tono muscolare
- Massaggio

2. Specifiche tecniche:

Voltaggio:	Batteria alcalina 1,5 V AAx2EA
Modalità operative:	Da A a F (6 modalità)
Frequenza:	1~100 Hz
Durata del programma:	12 minuti
Corrente in uscita:	Max. 9,8 mA
Dimensioni:	21x10x2,3 cm
Peso:	57,4 g

3. Caratteristiche del prodotto:


3.1. Terapia a bassa frequenza

Con l'aiuto dell'elettricità, il dispositivo crea un impulso a bassa frequenza che ha un effetto positivo sul corpo. Impostare l'intensità a proprio piacimento. Una bassa frequenza ha un effetto delicato sul corpo, simile ad un massaggio.

3.2. Sono disponibili 6 diversi programmi

- 3.2.1. E' sufficiente selezionare una tra le 6 modalità operative
- 3.2.2. Il programma si spegne automaticamente dopo 12 minuti

4. Come usarlo

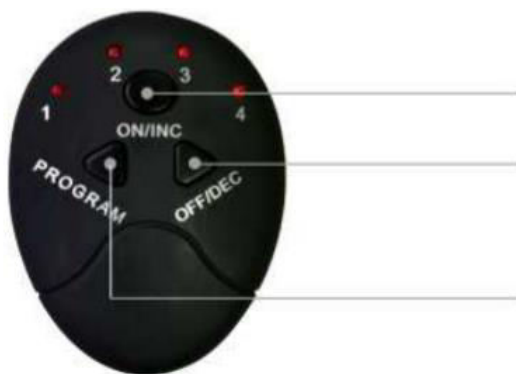


ON / INC: accendere / aumentare l'intensità

OFF / DEC: spegnere / diminuire l'intensità

PROGRAMMA: per passare da un programma all'altro

Indicatori della modalità operativa:

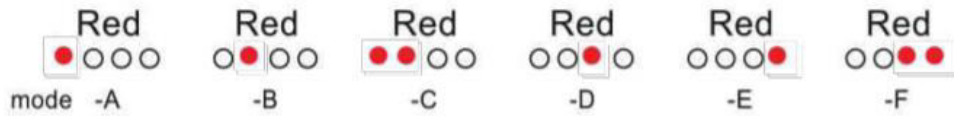

Quando si preme il pulsante “power on/increase intensity” (accendere/aumentare intensità), aumenta l’intensità della luce dell'indicatore e viceversa, quando si preme il pulsante “power off/decrease intensity” (spegnimento/diminuzione intensità), l’intensità della luce dell'indicatore diminuisce.

- Entrambi i pulsanti hanno 10 livelli
- Passare da un programma all'altro: selezionare tra le 6 modalità (da A a F)
- Quando la batteria è scarica, rimuovere il coperchio dal vano batteria e sostituire la batteria, quindi reinstallare il coperchio.

5. Come usare il {Six pack} kit

- Applicare sempre su pelle pulita e asciutta
- Rimuovere la pellicola protettiva dai cuscinetti in gel
- Posizionare il dispositivo sulla parte del corpo desiderata (addome, gambe, spalle, ecc.)

! NON ACCEDERE IL DISPOSITIVO PRIMA DI AVERLO POSIZIONATO SUL CORPO.

! NON TOCCARE LE SUPERFICI ADESIVE PER EVITARE DI RIDURRE LA DURATA DEI CUSCINETTI IN GEL.

6. Primo utilizzo

- Estrarre il dispositivo dalla scatola
- Posizionare il dispositivo sulla parte del corpo desiderata
- Selezionare il programma desiderato
- Regolare l'intensità
- La durata del programma è di 12 minuti
- Premere più volte il pulsante di spegnimento fino a quando la spia non si spegne

Il trattamento è ottimale se si utilizza il dispositivo per un massimo di 12 minuti alla volta, 2-3 volte al giorno. Un trattamento di durata maggiore, può causare un forte senso di stanchezza.

Evitare l'uso del dispositivo 30 minuti dopo un pasto; è meglio usare il dispositivo dopo la doccia su una pelle pulita e asciutta

7. Cura

- Spegnere il dispositivo dopo l'uso.
- Posizionare una pellicola protettiva sui cuscinetti in gel per mantenerli adesivi e puliti.

- Rimuovere lo sporco con un panno umido e un detergente delicato.
- Non esporre a luce solare diretta, calore, umidità, fuoco, elettricità, ecc.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non toccare il dispositivo con le mani bagnate.
- Se il dispositivo rimane inutilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria dalla centralina.

8. Sostituzione della batteria

- Aprire il coperchio del vano batteria
- Inserire la batteria correttamente (prestare attenzione ai poli +/-)
- Reinstallare la copertura
- Accendere il dispositivo e verificare se funziona

RIEPILOGO:



1. Aprire il vano batteria



2. Inserire le batterie (2xAAA)



3. Collegare la centralina all'unità



4. Rimuovere la pellicola protettiva



5. Collegare la centralina all'unità



6. Allacciare il bracciale sul braccio o gamba